




JBL PO4 Fosfaat sensitief test

Sneltest voor het bepalen van het fosfaatgehalte

Geschikt voor:

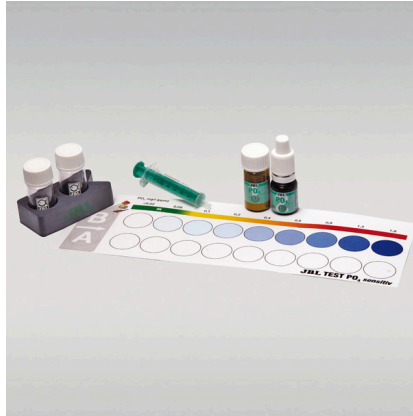

- Bepaling van de optimale fosfaatwaarde in aquaria en vijvers voor een optimale plantengroei of mogelijk algenoorzaak
- Laboratorium comparatorsysteem ter compensatie van de water-eigen verkleuring: Glazen cuvet met testwater vullen. Reagentia in een cuvet druppelen. Cuvetten in de houder plaatsen. Waarde op de kleurenkaart aflezen
- Gebruik: Bij nieuwe inrichting van zoet- en zeewater 1x per week. Ook bij algenproblemen en leidingwatercontrole
- Online laboratorium: kosteloze analyse en aanbevelingen met betrekking tot de door u gemeten waterwaarden
- Inhoud: 1 sneltest, Fosfaattest PO₄, incl. 2 reagentia, 2 glazen cuvetten met schroefdop, spuit, doseerlepel, comparatorblok en kleurenschema. Voldoende voor ca. 50 metingen. Navullende reagens afzonderlijk verkrijgbaar.

Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: <https://www.jbl.de/qr/25408>



JBL Testlab

Testkoffer met 13 testen voor een zoetwateranalyse testlab



JBL Testlab Marin

Professionele testkoffer voor zeewateranalyse



JBL Testlab ProScope

Testkoffer voor wateranalyses in plantaquaria



JBL Test Combi Set Pond

De belangrijkste watertesten voor tuinvijvers





JBL PO4 Fosfaat sensitief test

Accessoires



JBL onderdelenset
voor watertesten



JBL PO4 Fosfaat sensitief test



Vervangende onderdelen



JBL Assortiment kleurenkaarten voor watertesten

Kleurenkaarten voor JBL
watertesten



JBL Testlab leeg + inlays



JBL PO4 Fosfaat sensitief test



Productinformatie

Gezond aquarium/ gezonde vijver met natuurgetrouwe verhoudingen

De juiste waterwaarden in een aquarium / vijver hangen af van de visbezetting en de aanwezige planten. Ook wanneer het water er helder uitziet kan het belast zijn. Bij onjuiste waterwaarden kunnen ziekten en algen het gevolg zijn. Voor een gezond aquarium met natuurgetrouwe verhoudingen is een regelmatige controle, en eventuele aanpassing, van de waterwaarden van belang.

JBL biedt voor elke wateranalyse een test aan in de vorm van een sneltest of een kleuromslagtest. Deze bepalen een specifieke waarde of meerdere waarden tegelijk. Met deze watertesten kunt u algenproblemen tijdig herkennen en kan een tekort aan bijv. nitraat, nitriet, kalium of magnesium geconstateerd worden.

Waarom testen?

Fosfaat belandt voornamelijk in het aquarium door de verteringsprocessen van de vissen en door voedselresten die achterblijven. In vijvers komt fosfaat voornamelijk voor door loof en afstervende vijverplanten/algen. Onder ongunstige omstandigheden kan hierdoor een fosfaatgehalte bereikt worden, dat soms honderd maal boven de natuurlijke waarde ligt. Een onvermijdelijk gevolg is dat ongewenste algen zich explosief vermeerderen.

Aanbevolen fosfaatwaarde:


Zoetwateraquarium (gezelschapsaquarium): 0-0,4 mg/l Malawi/ Tanganjika aquarium: 0-0,4 mg/l

Plantenaquarium met weinig vissen (aquascaping): 0,1-1,5 mg/l

Zoutwateraquarium: 0-0,1 mg/l

Vijver: < 0,5 mg/l

In het JBL online laboratorium kunt u de door u gemeten waarden gratis laten analyseren en passende aanbevelingen ontvangen.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✗
Garantie Plus	✗
Handleiding	✓
QR-code	



JBL PO4 Fosfaat sensitief test

Productdetails

Artikelinformatie		
Productnaam	JBL PO4 Fosfaat sensitief testset	JBL PO ₄ Fosfaat sensitief Reagens
Art. nr	2540800	2540900
EAN code	4014162254085	4014162254092
EAN als streepjescode		
Inhoud	50 Testen	-
-	-	-
Vervaltermijn	36	36
MER incl. BTW	-	-
Basisprijs	-	-
Nominale vulhoeveelheid	-	-
Basiskwantiteit	1	1
Bruto gewicht	178 g	65 g
Netto gewicht	149 g	30 g
Gewichtsaanpassing	1000	1000

Afvoer		
Productnaam	JBL PO4 Fosfaat sensitief testset	JBL PO ₄ Fosfaat sensitief Reagens
Art. nr	2540800	2540900
Groene punt	✓	✓
Groep elektronisch afval	-	-
Afvoergewicht	-	-
Soort batterij	-	-
Innameplicht batterijen	-	-
Oplaadbare batterij	-	-
Afvoergewicht batterij	-	-
Wegwerpglas	-	-
PKA	29 g	13 g
Kunststof klein	-	-
Kunststof groot	-	-
Afvoergewicht metaal	0 g	0 g

Eigenschappen		
Productnaam	JBL PO4 Fosfaat sensitief testset	JBL PO ₄ Fosfaat sensitief Reagens
Art. nr	2540800	2540900





Eigenschappen		
Diersoort	Arowana, Axolotl, Barbelen, Berrmpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Regenboogvissen, Slakken, Sluierstaarten, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen	Arowana, Axolotl, Barbelen, Berrmpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Regenboogvissen, Slakken, Sluierstaarten, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen	Alle aquariumvissen
Volume habitat	50 testen	50 testen
Materiaal	Reagens 1: ascorbinezuur, natriumchloride. Reagens 2: Zwavelzuur, ammoniummolybdaat, gezuiverd water	Reagens 1: ascorbinezuur, natriumchloride. Reagens 2: Zwavelzuur, ammoniummolybdaat, gezuiverd water
Soort voer	-	-
Kleur	wit / transparant	wit / transparant
Dosering	10 ml testwater, een kleine maatlepel reagens 1, 10 dubbels reagens 2 en vervolgens 10 minuten laten staan	10 ml testwater, een kleine maatlepel reagens 1, 10 dubbels reagens 2 en vervolgens 10 minuten laten staan
Transportvoorwaarden	-	-



JBL PO4 Fosfaat sensitief test

Elektronisch etiket / verlichting		
Productnaam	JBL PO4 Fosfaat sensitief testset	JBL PO ₄ Fosfaat sensitief Reagens
Art. nr	2540800	2540900
Omgevingstemperatuur	-	-
Starttijd	-	-
Kwikzilver	-	-
Buislengte	-	-
Levensduur	-	-
Lumen	-	-
CRI-waarde	-	-
Dimbaar	-	-
Schakelcycli	-	-
PAR-waarde	-	-
Energie-efficiëntieklasse	-	-
UV-A	-	-
UV-B	-	-
UV-C	-	-
Kleurtemperatuur	-	-
Soort fitting	-	-

Technische informatie		
Productnaam	JBL PO4 Fosfaat sensitief testset	JBL PO ₄ Fosfaat sensitief Reagens
Art. nr	2540800	2540900
Bereik in liter	-	-
Bereik van - tot	-	-
Bereik in dagen	-	-
Bereik lengte bassin	-	-
Vermogen (Watt)	-	-
Capaciteit per uur	-	-
Capaciteit per dag	-	-
Hoogte	-	-
Lengte	-	-
Breedte	-	-
Doorsnede	-	-
Voltage	-	-
Voor	-	-
T8 26mm (Watt)	-	-
T5 16mm (Watt)	-	-
Afmetingen	-	-
Inhoud voor	-	-
Volume filterhouder	-	-
Volume filtermassa	-	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-	-



Technische informatie		
Drukhoogte	-	-





JBL PO4 Fosfaat sensitief test


Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	10 ml testwater, een kleine maatlepel reagens 1, 10 dubbels reagens 2 en vervolgens 10 minuten laten staan




JBL PO4 Fosfaat sensitief test



Veiligheidsinformatie

- Veiligheidsinformatie conform GHS	
Signaalwoord	Danger
Gevarensymbool	
Gevarenaanduiding	H314: Causes severe skin burns and eye damage.
Veiligheidsinstructie	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310a: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

Overige veiligheidsinformatie	
veiligheidsvoorschriften	✓
QR-code	





Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie		
Productnaam	JBL PO4 Fosfaat sensitief testset	JBL PO ₄ Fosfaat sensitief Reagens
Art. nr	2540800	2540900
BTW	21%	21%
Verkoopenheid (VE)	3	1
Volume verpakking	0.8l	0.45l
Afmetingen (l/b/h)	43 mm/106 mm/175 mm	30 mm/107 mm/140 mm
Status	240	0
Pallet	720	0
Productgroep	1	1
Douanetarief	38220000	38220000
Land van herkomst	DE	DE
Verpakkingswijze	(Vouw)doos	Kaart/Drukverpakking

VPE 1 gegevens		
Productnaam	JBL PO4 Fosfaat sensitief testset	JBL PO ₄ Fosfaat sensitief Reagens
Art. nr	2540800	2540900
VPE 1 materiaal	Folie g	Karton g
VPE 1 gewicht	3.5 g	660 g
VPE 1 lengte	105 mm	580 mm
VPE 1 breedte/ diepte	130 mm	390 mm
VPE 1 hoogte	180 mm	310 mm

VPE 2 gegevens		
Productnaam	JBL PO4 Fosfaat sensitief testset	JBL PO ₄ Fosfaat sensitief Reagens
Art. nr	2540800	2540900
VPE 2 materiaal	Karton g	geen
VPE 2 gewicht	540 g	-
VPE 2 lengte	400 mm	-
VPE 2 breedte/ diepte	400 mm	-
VPE 2 hoogte	350 mm	-

Verkoopinformatie		
Productnaam	JBL PO4 Fosfaat sensitief testset	JBL PO ₄ Fosfaat sensitief Reagens
Art. nr	2540800	2540900
Kassatekst	PO ₄ Test sensi.	PO ₄ sensi. Re
Schappplaats	-	-